

# 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。  
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

## 記

### ■ 変更日 2025 年 12 月 5 日（金）ご依頼分より

※有機酸スクリーニング検査の依頼書変更については、2025年12月上旬より、順次切り替えをさせていただきます。  
※容器の変更（SRLラベルの廃止）については、2025年9月下旬より順次切り替えをさせていただきます。  
※容器添付資材の変更については、2025年10月上旬より順次切り替えをさせていただきます。

### ■ 変更項目

|                                   |                 |                         |                            |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| メトトレキサート                          | 単純ヘルペスウイルス      | ムンプスウイルス                | HBV DNA定量 (IU)             |
| 低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)           | 水痘・帯状疱疹ウイルス     | オーム病クラミドフィラ (クラミジアシッタシ) | HCV RNA定量                  |
| 抗ガラクトース欠損IgG抗体                    | サイトメガロウイルス      | マイコプラズマニューモニエ           | サイトメガロウイルス核酸定量             |
| ニューモシスチス カリニ (P.jirovecii) DNA    | コクサッキーウイルス A群9型 | MAC抗体 (抗酸菌抗体定性)         | ヒトパピローマウイルス (HPV) ジェノタイプ判定 |
| HIV-1RNA定量                        | コクサッキーウイルス B群1型 | カンジダ抗体                  | CK-MB (CPK-MB)             |
| HIV-1/2特異抗体                       | コクサッキーウイルス B群2型 | 抗ヒストン抗体                 | サイトケラチン18フラグメント (CK-18F)   |
| 乳癌HER2遺伝子 (FISH)                  | コクサッキーウイルス B群3型 | 抗好中球抗体                  | コクリントモブロテイン (CTP)          |
| マイコプラズマジェニタリウム核酸およびマクロライド耐性変異同時検出 | コクサッキーウイルス B群4型 | C1エステラーゼ 抑制因子定量         | ミエリン随伴性糖蛋白 (MAG) 自己抗体      |
| 胎盤型アルカリフォスファターゼ (PLAP)            | コクサッキーウイルス B群5型 | 破傷風抗体                   | スルファチド自己抗体 (IgG/IgM)       |
| トータルPAI-1 (tPA・PAI-1 複合体)         | コクサッキーウイルス B群6型 | ジフテリア抗体                 | Ri自己抗体                     |
| プロテインC (抗原量)                      | 日本脳炎ウイルス        | 抗ランゲルハンス氏島抗体 (ICA)      | Hu自己抗体                     |
| 抗内因子抗体                            | インフルエンザウイルス A型  | HCV RNA コアジェノタイプ        | Yo自己抗体                     |
| HIT抗体 (血小板第4因子・ヘパリン複合体抗体)         | インフルエンザウイルス B型  | $\beta$ -D-グルカン         | 腫瘍随伴性レチノバシー (CAR) 自己抗体     |
| 抗HLA抗体 (スクリーニング検査)                | RSウイルス          | アンモニア                   | 有機酸スクリーニング検査               |
| アデノウイルス                           |                 |                         |                            |

総合検査案内電子版



●変更一覧表

| 項目<br>コード                                               | 検 査 項 目                                  | 変更内容          | 新                                                     | 現                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                  | 群臨<br>コード                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 血清<br>3871 1                                            | メトトレキサート                                 | 項目コード         | 血清 B214 2<br>血漿 B215 1                                | 血清 3871 1                                                                                               | 測定試薬<br>変更に伴<br>う、項目<br>コード、<br>検査方<br>法、保存<br>(安定性)、<br>報告範<br>囲、報告<br>桁数、<br>検体量の<br>変更<br><br>(※詳細につ<br>いては、9ペ<br>ージをご参照<br>ください) | 現：<br>3584<br><br>新：<br>血清<br>3595<br><br>血漿<br>3596 |
|                                                         |                                          | 検査方法          | CLEIA                                                 | EIA                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 基準値<br>(単位)   | 変更はありません                                              | 危険限界濃度：24 時間値 10 以上、<br>48 時間値 1 以上、72 時間値 0.1 以上<br>( $\mu\text{mol/L}$ )                              |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 保存<br>(安定性)   | 冷蔵 (35 日)                                             | 冷蔵                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 報告範囲          | 0.03 未満、<br>0.03~2490、2500 以上                         | 0.04 未満、<br>0.04~99900.00                                                                               |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 報告桁数          | 有効 3 桁<br>整数 4 桁<br>小数 変更はありません                       | 有効 7 桁<br>整数 5 桁<br>小数 2 桁                                                                              |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 検体量<br>(mL)   | 0.7                                                   | 0.5                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | JLAC10<br>コード | 血清 3M725-0000-023-052<br>血漿 3M725-0000-022-052        | 血清 3M725-0000-023-024<br>血漿 3M725-0000-022-024                                                          |                                                                                                                                      |                                                      |
| 血清<br>E779 3                                            | 低カルボキシ<br>化オステオ<br>カルシン<br>(ucOC)        | 検査方法          | CLEIA                                                 | ECLIA                                                                                                   | 測定機器<br>変更によ<br>る測定試<br>薬変更に<br>伴う、検<br>査方法、<br>報告範<br>囲、検体<br>量の変更<br><br>(※詳細に<br>ついては、<br>10 ページを<br>ご参照くだ<br>さい)                 | 5150                                                 |
|                                                         |                                          | 報告範囲          | 0.39 未満、<br>0.39~49.9、50.0 以上                         | 0.38 以下、<br>0.39~49.9、50.0 以上                                                                           |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 検体量<br>(mL)   | 0.6                                                   | 0.5                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | JLAC10<br>コード | 4Z282-0000-023-052                                    | 4Z282-0000-023-053                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                      |
| 血清<br>3674 0                                            | 抗ガラクトー<br>ス欠損 IgG 抗<br>体                 | 検査方法          | CLEIA                                                 | ECLIA                                                                                                   | 測定機器<br>変更によ<br>る測定試<br>薬変更に<br>伴う、検<br>査方法、<br>報告範<br>囲、検体<br>量の変更<br><br>(※詳細に<br>ついては、<br>11 ページを<br>ご参照くだ<br>さい)                 | 9420                                                 |
|                                                         |                                          | 報告範囲          | 1.0 未満、<br>1.0~99900000                               | 1.0 以下、<br>1.1~99900000                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 検体量<br>(mL)   | 0.6                                                   | 0.3                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | JLAC10<br>コード | 5G166-0000-023-052                                    | 5G166-0000-023-053                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                      |
| 喀痰<br>6853 8<br><br>肺胞洗浄液<br>K299 0<br><br>胸水<br>K300 7 | ニューモシス<br>チス カリニ<br>(P.jirovecii)<br>DNA | 項目名称          | ニューモシスチス・イロベチイ<br>(P.jirovecii) DNA 定性                | ニューモシスチス カリニ<br>(P.jirovecii) DNA                                                                       | 測定試薬<br>変更に伴<br>う項目名<br>称、検査<br>方法、基<br>準値、検<br>体量、保<br>存 (安定<br>性) の変<br>更<br><br>(※詳細に<br>ついては、<br>12 ページを<br>ご参照くだ<br>さい)         | 喀痰 なし<br><br>肺胞洗<br>浄液 な<br>し<br><br>胸水 な<br>し       |
|                                                         |                                          | 検査方法          | PCR (リアルタイム PCR)                                      | PCR                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 基準値<br>(単位)   | 喀痰 検出せず<br>肺胞洗浄液 検出せず                                 | 喀痰 陰性<br>肺胞洗浄液 陰性<br>胸水 陰性<br>組織 陰性                                                                     |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 検体量<br>(mL)   | 0.7                                                   | 2                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | 保存<br>(安定性)   | 凍結 (28 日)                                             | 凍結 (3 ヶ月)                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                         |                                          | JLAC10<br>コード | 喀痰 6B614-0000-061-862<br>肺胞洗浄液 6B614-0000-091-<br>862 | 喀痰 6B614-0000-061-851<br>肺胞洗浄液 6B614-0000-091-<br>851<br>胸水 6B614-0000-042-851<br>組織 6B614-0000-070-851 |                                                                                                                                      |                                                      |

| 項目<br>コード     | 検 査 項 目                                               | 変更内容        | 新                                                                                                  | 現           | 備 考                                                  | 群臨<br>コード  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| 血漿<br>A239 6  | HIV-1RNA<br>定量                                        | 項目コード       | 血漿 B279 1                                                                                          | 血漿 A239 6   | 親展報告書<br>から汎用報<br>告書への変<br>更、保 存<br>(安定性)<br>の変更     | 現：<br>5148 |
|               |                                                       | 保存<br>(安定性) | 冷蔵（28日）                                                                                            | 凍結（22日）     |                                                      | 新：<br>5161 |
|               |                                                       | 報告形態        | 汎用報告書                                                                                              | 親展報告書（封入封緘） |                                                      |            |
| 血清<br>B490 6  | HIV-1/2 特異<br>抗体                                      | 項目コード       | 血清 B538 3                                                                                          | 血清 B490 6   | 親展報告書<br>から汎用報<br>告書への変<br>更                         | 現：<br>5665 |
|               |                                                       | 報告形態        | 汎用報告書                                                                                              | 親展報告書（封入封緘） |                                                      | 新：<br>6283 |
| 組織<br>B004 5  | 乳癌HER2<br>遺伝子<br>(FISH)                               | 報告内容        | 分画親に変更はありません<br>変更になる分画子：判定<br>「境界域」のコメントを追加いたします。<br><br>※シグナル比、HER2 平均コピー数、病理専門医によるレビューに変更はありません |             | ASCO/CAP<br>の判定基準<br>に変更する<br>ため、判定<br>アルゴリス<br>ムの変更 | なし         |
| 部分尿<br>A871 4 | マイコプラズ<br>マジェニタリ<br>ウム核酸およ<br>びマクロライ<br>ド耐性変異同<br>時検出 | 検体量<br>(mL) | 部分尿1.5                                                                                             | 部分尿0.7      | 適切な検体<br>量への変更                                       | なし         |
| 髄液<br>A190 0  | 胎盤型アルカ<br>リフォスファ<br>ターゼ<br>(PLAP)                     | 所要日数<br>(日) | 2～8                                                                                                | 2～6         | 所要日数の<br>変更                                          | なし         |
| 血漿<br>4166 3  | トータルPAI-1<br>(tPA・PAI-1<br>複合体)                       |             | 2～4                                                                                                | 2～5         |                                                      | なし         |
| 血漿<br>4138 4  | プロテインC<br>(抗原量)                                       |             | 2～4                                                                                                | 2～5         |                                                      | なし         |
| 血清<br>K301 6  | 抗内因子抗体                                                |             | 4～10                                                                                               | 2～6         |                                                      | 3544       |
| 血清<br>K593 3  | HIT抗体（血小<br>板第4因子・<br>ヘパリン複合<br>体抗体）                  |             | 2～4                                                                                                | 2～6         |                                                      | 5857       |
| 血清<br>A290 9  | 抗HLA抗体<br>(スクリーニン<br>グ検査)                             |             | 3～9                                                                                                | 3～6         |                                                      | なし         |
| 血清<br>2426 6  | アデノウイルス                                               |             | 6～7                                                                                                | 4～6         |                                                      | 5998       |
| 血清<br>2429 3  | 単純ヘルペス<br>ウイルス                                        |             |                                                                                                    |             |                                                      | 5999       |
| 血清<br>6000 4  | 水痘・帯状疱<br>疹ウイルス                                       |             |                                                                                                    |             |                                                      | 6016       |
| 血清<br>A002 8  | サイトメガロ<br>ウイルス                                        |             |                                                                                                    |             |                                                      | 6001       |
| 血清<br>9265 8  | コクサッキーウ<br>イルスA群9型                                    |             |                                                                                                    |             |                                                      | 6002       |

| 項目<br>コード    | 検 査 項 目                            | 変更内容        | 新   | 現   | 備 考         | 群臨<br>コード |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----|-----|-------------|-----------|
| 血清<br>9267 6 | コクサッキーウ<br>イルス B群1型                | 所要日数<br>(日) | 6~7 | 4~6 | 所要日数の<br>変更 | 6003      |
| 血清<br>A326 9 | コクサッキーウ<br>イルス B群2型                |             |     |     |             | 6004      |
| 血清<br>9270 2 | コクサッキーウ<br>イルス B群3型                |             |     |     |             | 6005      |
| 血清<br>A329 6 | コクサッキーウ<br>イルス B群4型                |             |     |     |             | 6006      |
| 血清<br>A332 2 | コクサッキーウ<br>イルス B群5型                |             |     |     |             | 6007      |
| 血清<br>A335 9 | コクサッキーウ<br>イルス B群6型                |             |     |     |             | 6008      |
| 血清<br>9217 1 | 日本脳炎<br>ウイルス                       |             |     |     |             | 6009      |
| 血清<br>0386 3 | インフルエンザ<br>ウイルス A型                 |             |     |     |             | 6010      |
| 血清<br>0406 0 | インフルエンザ<br>ウイルス B型                 |             |     |     |             | 6011      |
| 血清<br>9290 0 | RSウイルス                             |             |     |     |             | 6012      |
| 血清<br>0409 7 | ムンプス<br>ウイルス                       |             |     |     |             | 6013      |
| 血清<br>A041 5 | オーム病クラ<br>ミドフィラ<br>(クラミジア<br>シッタシ) |             |     |     |             | 6014      |
| 血清<br>A323 2 | マイコプラズマ<br>ニューモニエ                  |             |     |     |             | A323      |

| 項目<br>コード      | 検 査 項 目                   | 変更内容        | 新                                                                                                          | 現                        | 備 考                     | 群臨<br>コード                                        |
|----------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 血清<br>9163 1   | MAC抗体<br>（抗酸菌抗体<br>定性）    | 所要日数<br>（日） | 4～6                                                                                                        | 3～5                      | 所要日数の<br>変更             | 6091                                             |
| 血清<br>7682 7   | カンジダ抗体                    |             | 14～20                                                                                                      | 14～16                    |                         | なし                                               |
| 血清<br>6472 1   | 抗ヒストン<br>抗体               |             |                                                                                                            | 12～17                    |                         | なし                                               |
| 血清<br>6473 0   | 抗好中球抗体                    |             |                                                                                                            | 13～17                    |                         | 血清<br>なし<br>血清<br>なし<br><br>血清<br>なし<br>血清<br>なし |
| 血清<br>8580 9   | C1エステラー<br>ゼ 抑制因子<br>定量   |             |                                                                                                            |                          |                         |                                                  |
| 血清<br>8585 4   | 破傷風抗体                     |             |                                                                                                            |                          |                         |                                                  |
| 血清<br>8586 3   | ジフテリア<br>抗体               |             |                                                                                                            |                          |                         |                                                  |
| 血清<br>8565 6   | 抗ランゲルハ<br>ンス氏島抗体<br>（ICA） | 所要日数<br>（日） | 14～20                                                                                                      | 12～17                    | 所要日数の<br>変更と備考<br>欄への追記 | 血清<br>なし                                         |
|                |                           | 備考          | スクリーニング検査およびタイター測<br>定の2段階検査です。スクリーニング検<br>査で陰性が確定しない場合、タイター<br>測定を実施します。タイター測定での<br>基準値は5未満（JDF UNITS）です。 | -                        |                         |                                                  |
| 血清<br>6574 8   | HCV RNA<br>コアジェノタイプ       | 所要日数<br>（日） | 5～7                                                                                                        | 3～5                      | 所要日数と<br>保存（安定<br>性）の変更 | 2894                                             |
|                |                           | 保存<br>（安定性） | 冷蔵<br>（14日）                                                                                                | 凍結<br>（3ヵ月）              |                         |                                                  |
| 血液<br>3626 3   | β-D-グルカン                  | 報告範囲        | 4.0未満、<br>4.0～499、500 以上                                                                                   | 5.0以下、<br>5.1～299、300 以上 | 適切な報告<br>範囲への変<br>更     | 2076                                             |
| 除蛋白液<br>0399 9 | アンモニア                     | 報告範囲        | 7 未満、<br>7～500、501 以上                                                                                      | 7 未満、<br>7～99999999      | 報告範囲と<br>報告桁数の<br>変更    | 0416                                             |
|                |                           | 報告桁数        | 有効3桁<br>整数3桁<br>小数 変更はありません                                                                                | 有効8桁<br>整数8桁<br>小数0桁     | 適切な材料<br>名称への変<br>更     |                                                  |
| 血清<br>A238 7   | HBV DNA<br>定量（IU）         | 保存<br>（安定性） | 冷蔵<br>（28日）                                                                                                | 凍結<br>（21日）              | 保存（安定<br>性）と報告<br>内容の変更 | 血清<br>6676                                       |
| 血清<br>E660 4   | HCV RNA<br>定量             |             | 冷蔵<br>（28日）                                                                                                | 凍結<br>（21日）              |                         | 血清<br>5147                                       |

| 項目<br>コード       | 検 査 項 目                               | 変更内容          | 新                                                | 現           | 備 考                           | 群臨<br>コード   |          |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------|
| 血漿<br>9211 7    | サイトメガロ<br>ウイルス核酸<br>定量                |               | 冷蔵<br>(28日)                                      | 凍結<br>(84日) |                               |             |          |
|                 |                                       | 報告内容          | 報告のコメントに「判定不能」、「増幅不良のため判定できませんでした」を追加します         |             |                               | 5763        |          |
| 子宮頸部<br>B245 8  | ヒトパピロー<br>マウイルス<br>(HPV) シェ<br>ノタイプ判定 | 報告内容          | 報告のコメントに「判定不能」、「増幅不良のため判定できませんでした」を追加します         |             |                               | 報告内容の<br>変更 | なし       |
| 血清<br>A672 5    | CK-MB<br>(CPK-MB)                     | 保存<br>(安定性)   | 冷蔵<br>(14日)                                      | 凍結<br>(21日) | 保存（安定<br>性）の変更                | 7989        |          |
| 血清<br>C963 0    | サイトケラチ<br>ン18フラグメ<br>ント<br>(CK-18F)   |               | 冷蔵<br>(5日)                                       | 凍結<br>(31日) |                               | 6226        |          |
| 中耳洗浄液<br>B901 9 | コクリントモ<br>プロテイン<br>(CTP)              |               | 冷蔵<br>(28日)                                      | 凍結<br>(28日) |                               | なし          |          |
| 血清<br>6846 6    | ミエリン随伴<br>性糖蛋白<br>(MAG) 自己<br>抗体      | 保存<br>(安定性)   | 凍結<br>(4ヵ月)                                      | 凍結          | 保存（安定<br>性）と案内<br>書備考欄の<br>変更 | なし          |          |
| 血清<br>6850 1    | スルファチド<br>自己抗体<br>(IgG,IgM)           |               | 凍結<br>(1年)                                       | 凍結          |                               | なし          |          |
| 血清<br>A068 6    | Ri自己抗体                                |               | 凍結<br>(28日)                                      | 凍結          |                               | 血清<br>なし    |          |
| 血清<br>A069 5    | Hu自己抗体                                |               |                                                  |             |                               |             | 血清<br>なし |
| 血清<br>A070 3    | Yo自己抗体                                | 血清<br>なし      |                                                  |             |                               |             |          |
| 血清<br>A071 2    | 腫瘍随伴性<br>レチノバシー<br>(CAR) 自己<br>抗体     | 血清<br>なし      |                                                  |             |                               | 血清<br>なし    |          |
|                 |                                       | 総合検査案内<br>備考欄 | Athena社到着までに保存安定期間を越<br>えないよう、余裕をもってご提出くだ<br>さい。 | —           |                               |             |          |

| 項目<br>コード     | 検 査 項 目          | 変更内容 | 新                                                                                                                    | 現                                                                                  | 備 考                     | 群臨<br>コード |
|---------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 部分尿<br>8248 8 | 有機酸スクリー<br>ニング検査 | 依頼書  | <p>依頼書の氏名欄を匿名符号から氏名（実名）に変更します。</p>  |  | 依頼書氏名<br>欄への記載<br>内容の変更 | 5964      |

■容器の変更（SRL ラベルの廃止）

下記の採取容器に貼付されているSRLラベル貼付を廃止いたします。同じサイズの容器は、印字されている表記で見分けていただくようお願いいたします。容器には四角内に記載した印字がされています。

G



ヘパリン入り (真空採  
血量5mL)

G



10  
mL  
H

ヘパリン入り (真空採  
血量10mL)

C



2  
mL  
NA

EDTA-2Na入り (真空  
採血量2mL)

C



5  
mL  
NA

EDTA-2Na入り (真空  
採血量5mL)

A



7  
mL  
NA

EDTA-2Na入り (真空  
採血量7mL)

U



糞便容器

R



保存液入り (真空採血  
量5mL)

※PNK：容器のラベルはなくなります。  
外装に変更はありません。

i、Y



蛍光ポリスビッツ



【オブジェクトケース】  
プレバート (スライ  
ドグラス)  
ノレバート (スプレ  
イダグラス)

■案内書の容器取扱い方法への追記

S09、S06 容器の容器形態情報に凝固促進フィルムが入っている旨を追記いたします。

| 容 器 形 態                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 検 査 項 目                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div> <div>S09</div> <div>S06</div>  <div>9mL用 (S09)</div>  <div>6mL用 (S06)</div> </div> | <div> <div>分離剤+<br/>凝固促進フィルム入り<br/>(真空採血量<br/>9mLまたは6mL)</div> </div> | <div> <div>生化学検査一般<br/>血清学的検査一般<br/>その他</div> </div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <div>貯蔵方法<br/>室温<br/>有効期間<br/>製造から 1年</div> </div>              |                                                      |

| 容 器 形 態                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 検 査 項 目                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div> <div>S09</div> <div>S06</div>  <div>9mL用 (S09)</div>  <div>6mL用 (S06)</div> </div> | <div> <div>分離剤入り<br/>(真空採血量<br/>9mL又は6mL)</div> </div>   | <div> <div>生化学検査一般<br/>血清学的検査一般<br/>その他</div> </div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <div> <div>貯蔵方法<br/>室温<br/>有効期間<br/>製造から 1年</div> </div> |                                                      |



## ● メトトレキサート


相関が良好な試薬へ変更いたします。これに伴い項目コード、検査方法、報告範囲、報告桁数、検体量が変更となります。

### ▼現法と新法の比較

| 変更内容      | 新                                            | 現                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目名称      | 変更はありません                                     | メトトレキサート                                                                                                            |
| 項目コード     | 血清 B214 2<br>血漿 B215 1                       | 血清 3871 1                                                                                                           |
| 検査方法      | CLEIA                                        | EIA                                                                                                                 |
| 基準値（単位）   | 変更はありません                                     | 血清 危険限界濃度：24時間値10以上、<br>48時間値1以上、72時間値0.1以上<br>血漿 危険限界濃度：24時間値10以上、<br>48時間値1以上、72時間値0.1以上<br>( $\mu\text{mol/L}$ ) |
| 報告範囲      | 0.03未満、<br>0.03～2490、2500以上                  | 0.04未満、<br>0.04～99900.00                                                                                            |
| 報告桁数      | 有効3桁、整数4桁、小数2桁                               | 有効7桁、整数5桁、小数2桁                                                                                                      |
| 検体量（mL）   | 0.7                                          | 0.5                                                                                                                 |
| JLAC10コード | 血清3M725-0000-023-052<br>血漿3M725-0000-022-052 | 血清 3M725-0000-023-024<br>血漿 3M725-0000-022-024                                                                      |

## ● 相関図

### メトトレキサート

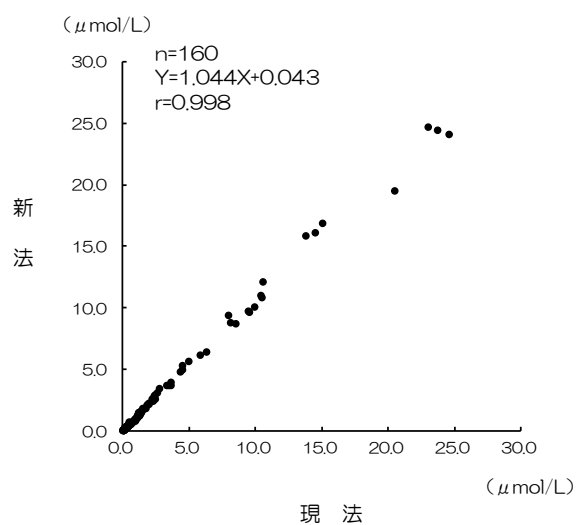

## ● 参考文献

測定法：鈴木 瑛真, 他：医療検査と自動化 50（1）：16～21, 2025.

## ● 低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)


測定機器変更に伴い測定試薬を変更します。これに伴い検査方法、報告範囲、検体量が変更となります。

### ▼現法と新法の比較

| 変更内容      | 新                           | 現                           |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 項目名称      | 変更はありません                    | 低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)     |
| 項目コード     | 変更はありません                    | 血清 E779 3                   |
| 検査方法      | CLEIA                       | ECLIA                       |
| 基準値 (単位)  | 変更はありません                    | 4.50未満 (ng/mL)              |
| 報告範囲      | 0.39未満、<br>0.39~49.9、50.0以上 | 0.38以下、<br>0.39~49.9、50.0以上 |
| 報告桁数      | 変更はありません                    | 有効3桁、整数8桁、小数2桁              |
| 検体量 (mL)  | 0.6                         | 0.5                         |
| JLAC10コード | 4Z282-0000-023-052          | 4Z282-0000-023-053          |

## ● 相関図

低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)

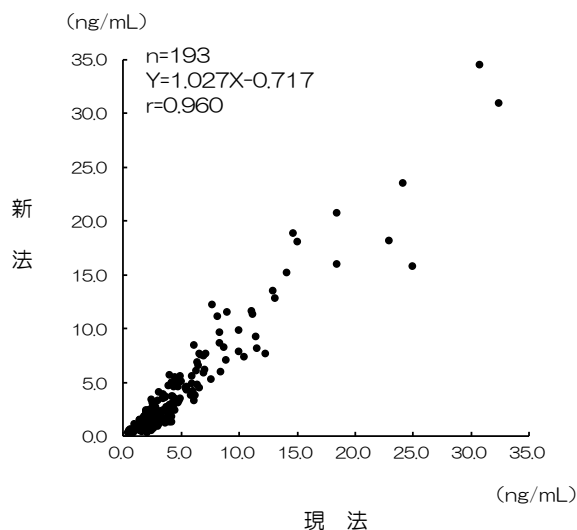

## ● 参考文献

測定法：西村 順, 他：医学と薬学 57 (4) : 523~535, 2007.

## ● 抗ガラクトース欠損IgG抗体


測定機器変更に伴い測定試薬を変更します。これに伴い検査方法、報告範囲、検体量が変更となります。

### ▼現法と新法の比較

| 変更内容      | 新                      | 現                      |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 項目名称      | 変更はありません               | 抗ガラクトース欠損IgG抗体         |
| 項目コード     | 変更はありません               | 血清 3674 0              |
| 検査方法      | CLEIA                  | ECLIA                  |
| 基準値（単位）   | 変更はありません               | 6.0未満（AU/mL）           |
| 報告範囲      | 1.0未満、<br>1.0～99900000 | 1.0以下、<br>1.1～99900000 |
| 報告桁数      | 変更はありません               | 有効3桁、整数8桁、小数1桁         |
| 検体量（mL）   | 0.6                    | 0.3                    |
| JLAC10コード | 5G166-0000-023-052     | 5G166-0000-023-053     |

## ● 相関図

抗ガラクトース欠損IgG抗体

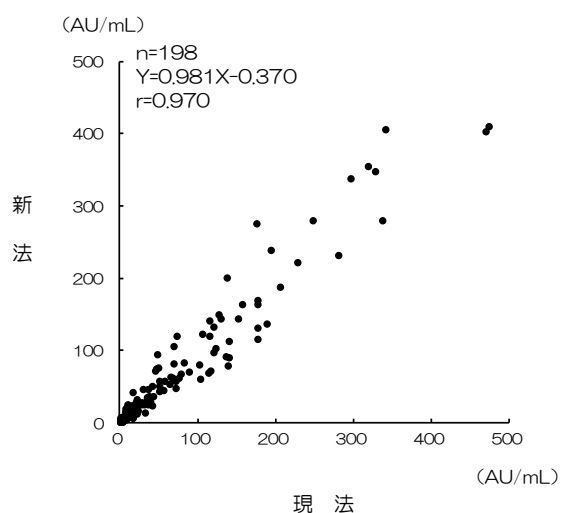

## ● 参考文献

測定法：平山 吉朗, 他：医学と薬学 42（5）：817～828, 1999.

## ● ニューモシスチス カリニ (P.jirovecii) DNA

検出感度が高く非特異反応の少ない測定系に変更します。これに伴い、基準値、有効材料、保存（安定性）を変更いたします。合わせて、日本医真菌学会の表記に従った菌名を用いた項目名称に変更いたします。

### ▼現法と新法の比較

| 変更内容      | 新                                                 | 現                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目名称      | ニューモシスチス・イロベチイ (P.jirovecii) DNA定性                | ニューモシスチス カリニ (P.jirovecii) DNA                                                                      |
| 項目コード     | 変更はありません                                          | 喀痰 6853 8<br>肺胞洗浄液 K299 0<br>胸水 K300 7                                                              |
| 検査方法      | PCR（リアルタイムPCR）                                    | PCR                                                                                                 |
| 基準値（単位）   | 喀痰：検出せず<br>肺胞洗浄液：検出せず<br>（なし）                     | 喀痰：陰性<br>肺胞洗浄液：陰性<br>胸水：陰性<br>組織：陰性<br>（なし）                                                         |
| JLAC10コード | 喀痰 6B614-0000-061-862<br>肺胞洗浄液 6B614-0000-091-862 | 喀痰 6B614-0000-061-851<br>肺胞洗浄液 6B614-0000-091-851<br>胸水 6B614-0000-042-851<br>組織 6B614-0000-070-851 |
| 保存（安定性）   | 凍結（28日）                                           | 凍結（3ヵ月）                                                                                             |

## ● 相関一致率

|    |      | 現法 |    |     |
|----|------|----|----|-----|
|    |      | 陽性 | 陰性 | 合計  |
| 新法 | 陽性   | 48 | 15 | 63  |
|    | 検出せず | 0  | 38 | 38  |
|    | 合計   | 48 | 53 | 101 |

(n=101)

陽性一致率：100.0% (48/48)

陰性一致率：71.1% (38/53)

全体一致率：85.1% (86/101)

## ● 参考文献

測定法： Monroy-Vaca EX, et al. J Clin Microbiol. 52 (1) : 45~51, 2014.